


Anusscopes jetables

SoloSpec^{MC}

Mode d'emploi

par Orion Concepts Inc.

www.orionconceptsinc.com

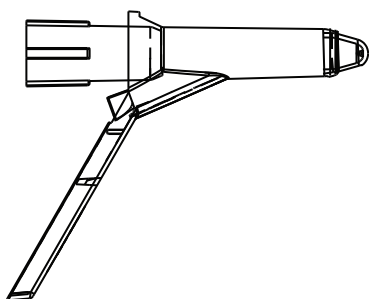

UTILISATION PRÉVUE et MODE D'EMPLOI


Les **anusscopes jetables SoloSpec^{MC}** sont conçus pour l'examen et le diagnostic ou le traitement de l'anus et du rectum et sont à usage unique. Les anusscopes peuvent être utilisés avec ou sans le guide de lumière à usage unique et une source lumineuse approuvée.

Les **anusscopes jetables SoloSpec^{MC}** sont fournis propres et non stériles dans un emballage scellé et sont à usage unique. Après emploi, jetez-les de manière appropriée.

Anusscopes jetables SoloSpec^{MC} (fig.1)

1. Insérez le guide de lumière à usage unique (3) dans l'illuminateur endoscopique au DEL GreenStar^{MC} (4) puis glissez le guide dans le cran du corps de l'anuscope (2). Laissez l'obturateur (1) en place pendant l'insertion.

Un lubrifiant approprié peut être utilisé sur le bout de l'obturateur et le tube du dispositif.

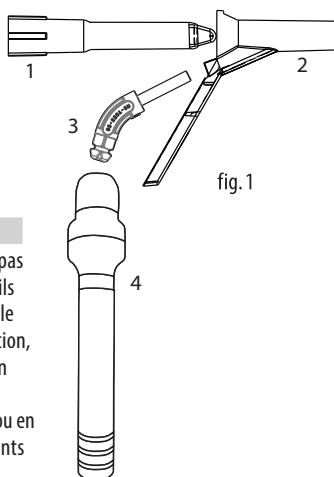

AVERTISSEMENTS et PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT : Les dispositifs ne doivent pas être utilisés avec un équipement au laser, car ils pourraient réfléchir, transmettre ou absorber le laser ou toute autre énergie de photocoagulation, ce qui entraînerait la combustion ou l'émission possible de gaz irritants.

AVERTISSEMENT : Les dispositifs en transit ou en stockage peuvent subir des dégâts indépendants de la volonté du fabricant ou du fournisseur.

AVERTISSEMENT : Inspectez chaque dispositif avant de l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Traitez les anusscopes utilisés comme du matériel biodangereux et infectieux. Jetez ce matériel dans une poubelle appropriée conformément aux règles locales.

AVERTISSEMENT : Les dispositifs ne sont pas compatibles avec les rayons gamma et l'autoclave.

PRÉCAUTION : Le dispositif ne doit être utilisé que par du personnel formé.

PRÉCAUTION : Produit Rx seulement. La loi fédérale américaine restreint la vente de ce dispositif par ou sur ordonnance d'un médecin.

PRÉCAUTION : L'obturateur doit être en place lorsque l'anuscope est inséré dans le patient

PRÉCAUTION : Les anusscopes jetables SoloSpec^{MC} sont à usage unique et doivent être jetés après emploi pour éviter tout risque possible d'infection.

PRÉCAUTION : Protégez le dispositif des rayons du soleil.

Tableau de référence				
N° de figure	Dispositif	Classe	Taille	Code de produit
1(1,2)	Anuscope jetable SoloSpec ^{MC}	II	Petit	42301-1
		II	Moyen	42301-2
		II	Grand	42301-3
1(1,2)	Anuscope jetable SoloSpec ^{MC} , encoche	II	Moyen	40801-14-2
		II	Grand	40801-14-3
1(1,2)	Anuscope jetable SoloSpec ^{MC} , Embout biseauté	II	Moyen	42301-2-S
1 (4)	Illuminateur endoscopique au DEL GreenStar ^{MC}	I	—	GS-LEI-A-HP
1 (3)	Guide de lumière à usage unique	—	—	GS-2201-SU

Symboles et définitions

Avertit l'utilisateur d'un problème avec le dispositif associé à sa bonne ou mauvaise utilisation : mauvais fonctionnement, panne, dégâts, ou dégâts sur d'autres matériels.

Attention : Consultez les documents joints.

MISE EN GARDE : Avertit l'utilisateur de la possibilité de blessures pouvant être mortelles et d'autres effets indésirables en cas d'utilisation, bonne ou mauvaise, du dispositif.

Date de fabrication (aaaa-mm)

Fabricant

Numéro de catalogue

Code de lot

Non stérile

Matériaux d'emballage recyclables

Identifiant unique de dispositif

Limite de température

Gardez éloigné de la pluie

Protégez le dispositif des rayons du soleil

Non remployable

Date de péremption

Consulter les instructions d'utilisation